sagemax.com

sagemax®



NexxZr®+ Multi

自然的美学
高效的流程

自然的美学
高效的流程

NexxZr®+ Multi



NexxZr®+ Multi 是一种牙科多层色氧化锆（4Y-TZP牙颈，5Y-TZP切端），具有自然的颜色和半透明梯度以及高弯曲强度（850 Mpa牙颈，650 MPa切端）。

这些特性使得能够在前后牙区制作出高度美观、整体的单冠和牙桥修复体。经过特别调整的半透明梯度确保了牙颈区域的良好覆盖，并增加了切端区域的半透明性。优秀的牙体过渡色，可以保证您高效的完成如天然牙齿的修复。

技术参数

类型
5Y-TZP（切端）
4Y-TZP（牙颈）

弯曲强度
650 MPa（切端）
850 MPa（牙颈）


半透明
49 %（切端）
45 %（牙颈）

指示
单冠修复
和 3 单位桥

加工技术
内染技术
外染技术
回切技术

亮点

1 自然过渡色
高效完成如天然牙一样的修复

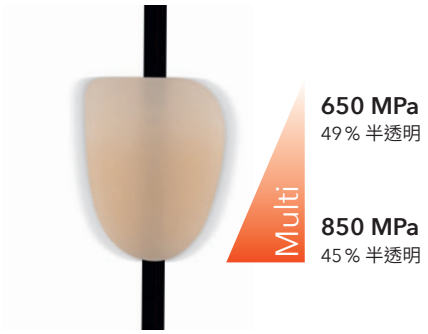

高半透明性



自然色和半透明渐变


2 特别调整的半透明过渡区域
牙颈区域覆盖率好，增加切端的透明度



真正的半透明梯度



逼真的美学

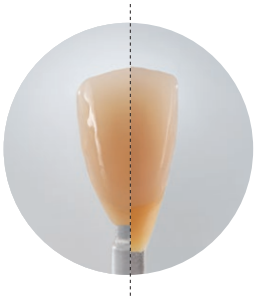

牙颈区域覆盖率良好


3 高弯曲强度
单冠修复到 3 单位桥



个性化可能性


多层色概念

	16 mm 圆盘	20 mm 圆盘
650 MPa 49% 半透明	切端 **3.2 mm**	切端 **4.0 mm**
过渡区域	过渡区域 **3.2 mm**	过渡区域 **4.0 mm**
850 MPa 45% 半透明	牙本质 **9.6 mm**	牙本质 **12.0 mm**

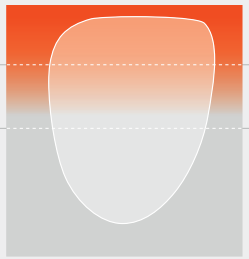

盘的高度定位决定了修复体中切端面积的大小

烧结方案

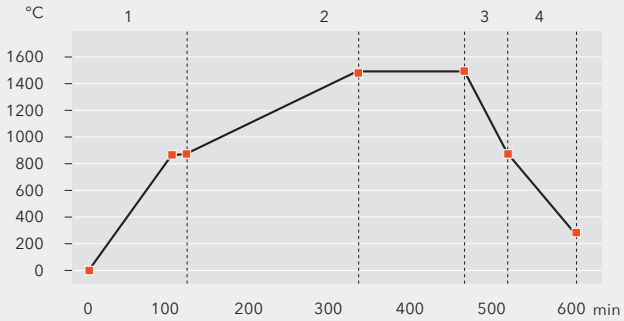

阶段	温度 °C | °F	加热/冷却速率 °C/min. | °F/min.	保持时间 min.
1	20 – 900 | 68 – 1652	10 | 18	30
2	900 – 1500 | 1652 – 2732	3.3 | 5.94	120
3	1500 – 900 | 2732 – 1652	10 | 18	–
4	900 – 300 | 1652 – 572	8.3 | 14.94	–

有关更多详细信息,请参阅 NexxZr 使用说明。

sagemax.com/eifu

包装规格

材料形状
W-98, Z-95

厚度
16, 20 mm

颜色
A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
ZH-CN/MDR/2023-11/Rev.1